

入力スイッチの選定のために！

ファイン・チャットの導入における一番のハードルは適切な入力スイッチの選定です。入力スイッチは障害や身体状況に応じて適切なものを選定する必要があります。ファイン・チャットは本カタログに記載した入力スイッチに加え、他メーカーの入力スイッチもほとんどのものが対応しています。選定方法や設置方法は右記のホームページを参照頂くか、販売店へお問い合わせ下さい。

マイスイッチホームページ
<http://myswitch.jp/>



IT機器は苦手！
と言う方はこちら！

パソコンじゃない、
だから、**カンタン！**

ファイン・チャット
fine·chat
重度障害者用意思伝達装置

- 自分のパソコンやタブレットと連携できます！
- 乾電池、モバイルバッテリーでも駆動するので災害時も安心です！

安全に関する
ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点はお買い上げの販売店にご相談の上、正しくご使用ください。
- 呼び出しブザーはナースコールではありません。生命に関わる用途での使用はできません。
- 学習リモコンの信号登録では、安全や生命に関わる機器の登録は行わないでください。

ご購入の前に

- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。予めご了承ください。
- このカタログの掲載商品の詳細については、販売店または当社におたずねください。

お取り扱い店

アクセスエール 株式会社

〒567-0032

大阪府茨木市西駅前町6-22-301

TEL. 072-646-7260 FAX. 072-626-1113

ホームページ: <https://accessyell.co.jp/>

このカタログの記載内容は2026年9月1日現在のものです。
本書からの無断の複製はかたくお断りいたします。



AccessYell アクセスエール株式会社

2026/09

意思伝達装置
カタログ

ついに登場、iPad専用の意思伝達装置アプリ！

重度障害者用意思伝達装置アプリ

ファイン・チャット **NEO**




第1回 福祉の部

ついに登場! 待望のiPadを使った重度障害者用意思伝達装置

NEW ファイン・チャット NEO

iPadと意思伝達装置アプリ「ファイン・チャットNEO」に加え、
入力スイッチ接続アダプタ「コネクトエール」、
そしてWiFi不要のスマートリモコン「リモコンエール」の組み合わせで
意思伝達装置として機能します。

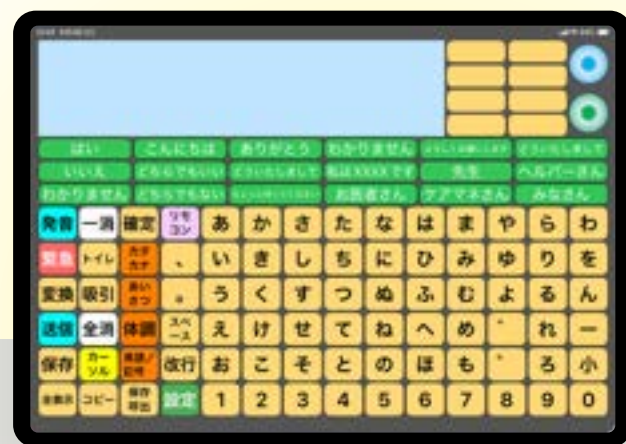

ファイン・チャットNEO+iPad



入力スイッチ



コネクトエール
(入力スイッチ接続)



リモコンエール
(環境制御装置)

課題 解決

従来の意思伝達装置の課題を すべて解決しました!

利用者にとって

不具合が少なく、安心して使えます。
屋内だけでなく移動中でも簡単に使えます。

支援者にとって

普段使っているiPhoneと同じです。
画面のタッチ操作で支援できます!

行政にとって

デモ機の入手が容易で、事前に十分に練習してもらえるので
判定の負担が減ります。

販売店にとって

導入前のデモ機の準備の手間や、導入後のトラブルも少なく、
負担が減ります。

特長1

文章作成がより早く簡単に!



AIも活用した漢字変換、予測変換で、より早く簡単に
できます。

文章の保存、呼出も簡単で、使うほど、会話のスピー
ドが上がります!

特長2

自然な発音で会話ができる!



オンラインでは「コエフォント」を利用^(※)して、自然
で個性のある音声での会話が可能で(一部の
み)。

また、障害者手帳のある方は、無料で自分の声を登
録して利用できます。

※オフラインではSiriの声で会話ができます。

特長3

メール、LINEもらくらく一発送信!



作成した文章は、「送信」の枠を選択するだけで、
LINE、メール、メッセージ、電話番号のショート
メッセージ等へメッセージを送ることができます。
いつでも離れた人へ連絡が可能です。

※事前に支援者によるiOSのショートカットアプリでの設定が
必要です。

送信先選択画面の例

導入を容易とする様々な工夫を準備

その他の特長

身体状況に応じた多彩な操作方法

独自開発の視線トラッキングを2027年夏までに搭載予定 (iOSの視線トラッキングでは十分な精度が確保できません)



①画面のタッチ



②マウス操作※



③スイッチ操作

※マウス操作では画面左上の●の位置にカーソルを合わせれば、左クリックだけでスキャン操作も可能です。

文章の保存と呼出



支援者にも判りやすい設定画面



パネルの着せ替え機能



リモコンエールとの連携による家電操作



機器導入も複数の選択肢を用意

自費での導入

ファイン・チャットNEOはAppStoreからサブスクリプション方式で購入できます。



ファイン・チャットNEO

■価格(税込)	1カ月	3,000円
	6カ月	17,000円
	1年	33,000円

ダウンロード後、2週間は無料でお試しが可能です。



公費を利用した導入

「補装具費支給制度 重度障害者用意思伝達装置」をご検討ください。



iPad



コネクトエール



リモコンエール

■パッケージ名 ファイン・チャットNEO All-In

■価格 **495,000円(税込)** ※非課税申請中
450,000円(税抜)

■品番 AYL-NEOALL-Y5

■構成内容
ハードウェア
●iPad (10.9inch、256GB 2026年8月現在)
●コネクトエール
●リモコンエール
ソフトウェア (いずれも5年間の利用ライセンス)
●ファイン・チャットNEO
●リモコンエール・環境制御機能

制度利用にあたっては、弊社またはお近くの福祉機器業者へご相談ください。

【お願い】

ファイン・チャットNEOはハードにiPadを利用、アプリケーションは5年間のライセンス提供と、従来とは異なる構成のため行政への説明が必要な場合があります。弊社へご相談頂ければ対応いたします。

ファイン・チャットNEO アプリケーション仕様

対応デバイス: iPad / iPad Air / iPad Pro / iPad mini
対応OS: 16以降
必要ストレージ: 214MB以上 (Ver.1.0)

入力スイッチ接続アダプタ「コネクトエール」



iPhone / iPad を外部スイッチとつなぐ作業、コネクトエールが解決します！

品番：AYL-WT021W

希望小売価格：20,000円(税抜)
22,000円(税込)

重度障害者用意思伝達装置のパッケージ(ファイン・チャットNEO All-In)として購入した場合、本品はセット内容に含まれます

特長
1

これ1台で必要な機能が完結

iPhoneやiPadをアクセシビリティのスイッチコントロールで操作するために必要な、入力スイッチと電源の2つの機能が本アダプタ1個で完結。また、アダプタのスライドスイッチの切替で入力信号を「マウス左クリック」にすれば、視線トラッキング時の「確定」も可能です。



スライドスイッチ

特長
2

USB-CとLightning^{※1}の両方に対応

iOS機器の接続端子はUSB-Cが主流ですが、Lightning端子の機器を使っている方も多いと思います。本アダプタはケーブルを交換することでUSB-CとLightning端子の機器の両方に対応することが出来ます。

※1: Lightning端子の機器と接続する際は本製品に付属の専用ケーブルが必要です。



Lightning / USB-C ケーブル

USB-C / USB-Cケーブル

特長
3

本体ボタンとLEDで動作確認が可能

うまく動かない?という時の確認のため、本体にも入力スイッチ1、2に対応するボタンと、入力時に点灯する青色のLEDを搭載。本アダプタ単体でスイッチ操作の確認ができるので、トラブルの解決も簡単です。



確認LED

主な仕様	
対応OS	iOS 15.8以上、iPadOS 15.8 ~ 18.3.2、macOS 11 Big Sur以降 (Windows、Androidは動作保証外です。将来のiOS、iPadOS、macOSのバージョンアップへの対応を保証するものではありません。最新の対応OSの状況は当社HPにてご確認ください)
入力	φ3.5mmノラルミニジャック×2 (接点入力×2)、USB-C×1 (電源)
出力	USB-C×1 (入力1→スペース、入力2→リターンまたはマウス左クリック、電源)
電源	5 ~ 20V (接続機器・状態による) 電源供給には別途、USB-CアダプターやUSB-Cケーブルをご用意ください。
消費電流	0.1 ~ 2A (接続機器・状態による)
動作環境	温度：0 ~ 40度、湿度：20 ~ 80% (ただし結露しないこと) ※推奨値
外形寸法・重量	幅85mm×高さ15mm×奥行30mm・約50g
製品内容	コネクトエール本体、USB-C / USB-Cケーブル、Lightning / USB-Cケーブル、ぐらつき防止用スペーサー、取扱説明書、補足説明書

【注意事項】

●本アダプタは入力スイッチを介して「スペース」「リターン」「マウス左クリック」のいずれかの信号をiOS機器に入力するための機器です。その他のスイッチコントロールの操作方法については、iOS機器の取扱説明書をご覧ください。●分解や改造などを行わないで下さい。●使用中に異常を感じた場合はすぐに使用をやめて、他の機器との接続を外し、弊社までご連絡願います。●ケーブルの向きは必ず正しくセットしてください。間違えてセットすると、けがや故障の原因となります。●本製品は日本国内の電源を想定して設計されています。日本国外ではご使用いただけません。●本取扱説明書の指示以外の使用は事故の原因となります。絶対におやめ下さい。

【返品、交換、不具合について】

●お客様のご都合による返品はお受けできません。●保証期間内でも故意の破損、お客様による「分解、改造、修理」等による不具合については有償の修理(または新品交換)となる場合があります。

WiFi不要のスマートリモコン「リモコンエール」



リモコンエールなら、手の不自由な人でも簡単にテレビや家電製品の操作ができます！

品番：RS-BTIRX3

希望小売価格：18,000円(税抜) 19,800円(税込)

重度障害者用意思伝達装置のパッケージ(ファイン・チャットNEO All-In)として購入した場合、本品はセット内容に含まれます

特長
1

高齢者、障害者のための画面構成

iPhoneを活用した高齢者、障害者に使いやすいアプリとリモコン専用ユニットのみで構成、大型のボタンのタッチまたはオートスキャンの簡単操作。テレビだけのシンプルな画面から、最大16台までの家電を登録して使い分けするなど、利用者のニーズに応じた画面の設定が可能。

特長
2

WiFi不要^{※2}で利用可能

Bluetoothと赤外線の連携のみでテレビ操作が可能。だから、WiFi環境の無いご自宅や、WiFiの利用が禁止されている病院、施設でも安心して使えます！


特長
3

不要になったiPhoneを有効活用

本製品の操作専用アプリはiPhone6Sなど古い機種から対応していますので、ご家族、ご友人の眠っている古いiPhone、iPad (iOS15.8以上が動作する機種) をテレビ専用リモコンとして活用することで安価で導入できます。



画面構成の例

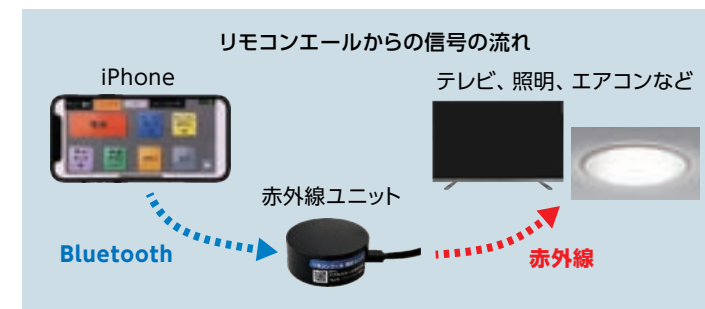

※1 入力スイッチによる操作をされる場合は、入力スイッチ、変換アダプタを別途ご準備下さい。

※2 アプリのインストール、アップデートではWiFi接続が必要です。

導入にあたって

リモコンエールは赤外線ユニットとiPhone/iPadで動作するアプリケーションの組み合わせで構成されます。導入に際しては、先にiOS/iPadOSの15.8以上で動作するiPhone/iPadにリモコンエールアプリをインストール(無料)して、「設定→5-3 デモモード」を「有効」にすれば、アプリの使い心地や設定内容の確認ができます。そのうえで、赤外線ユニットの購入をお勧めします。赤外線ユニットのデモ機貸出(有償)も対応しております。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

リモコンエール



App Store



取扱説明書

ダウンロードはこちら



主な仕様	
対応家電製品	プリセット対応テレビメーカー (29社) → 右記表を参照 ※赤外線リモコンで操作できない家電製品には対応していません。
赤外線部 (有効範囲)	水平方向:最大360°、垂直方向:最大180°、最大20m ※家電製品 (受信側) の性能により異なります
無線部	準拠規格: Bluetooth 5 通信距離: 見通し20m (使用環境によって異なります)
ソフトウェア (アプリ)	リモコンエール (Appストアよりダウンロード)
電源	5V (Micro-USBポートより供給)
消費電流	500mA以下
外形寸法・重量	直径60mm、高さ25.5mm・約30g
製品内容	リモコンユニット本体、USB Micro-Bケーブル、専用ACアダプター、取扱説明書

対応機種	
iPhone	iPhone6S以上
iPad	iPad (無印) 第5世代以上 iPad Air iPadAir2以上 iPad mini mini4以上 iPad Pro 全機種
対応OS	iOS15.8以上 (最新のiOSバージョンにアップデートしてお使いください)

対応家電機器について		
機器	対応数	主なメーカー
テレビ	29社	パナソニック、ソニー、シャープ
レコーダー	12社	パナソニック、ソニー、東芝
エアコン	13社	パナソニック、東芝、ダイキン
照明	35社	パナソニック、NEC、東芝
扇風機	22社	パナソニック、東芝、三菱電機
カスタムパネル	8,12,16分割	

- 操作可能な機器は、赤外線リモコン機能を搭載した機種に限りです。
- 上記プリセットデータを選択すれば、機器の主要な信号が画面に表示されます。それ以外の機能を利用したい時は追加で登録が可能です。
- その他の機材でも学習リモコン機能を使うことで様々な家電製品の操作が可能です。
- 対応家電の詳細は弊社HPおよびアプリのデモ画面で確認が可能です。
- テレビ以外の機器の操作にはサブスクリプション (800円/月) の契約が必要です。ファイン・チャットNEOを「補装具費支給制度重度障害者用意思伝達装置」として公費で導入する場合は、5年間の利用ライセンスが含まれます。

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点はお買い上げの販売店または当社へご相談の上、正しくご使用ください。

●呼出ブザー機能はナースコールではありません。生命に関わる用途での使用はできません。

注意事項 ■本製品のアプリケーションはiOS/iPadOS専用です。

■外部スイッチを使って操作する場合は別途、①「入力スイッチ」と、②入力スイッチとiPhone/iPadを接続する「アダプタ」が必要です。

固定具

キャスターアーム (iPad固定用) AYL-FCP004B



- キャスター本体とiPadの金具の両方で向きを変えられるので、楽に調整できます。
- 手軽に移動させることが出来るので、必要な時だけ使い、不要な時は簡単に片づけることが出来ます。

希望小売価格：80,000円(税抜)
88,000円(税込)

- ベッドの下にスタンドアームの脚が入るので、寝たままの楽な姿勢でiPadを操作することができます。(キャスターをベッドの下に差し込むため、ベッド下に約5.5cmの隙間が必要です)
- ALSなどの難病をはじめ、ベッド上でiPadを使う時間が多い方には最も適した支持具です。



スイングアーム (iPad固定用)



新発売


標準タイプ AYL-FCP005B
(高さ約90cm～125cm)

希望小売価格：98,000円(税抜)
107,800円(税込)

ロングタイプ AYL-FCP006B
(高さ約100cm～160cm)


希望小売価格：128,000円(税抜)
140,800円(税込)

(標準タイプとロングタイプの違いは弊社ホームページをご確認ください)

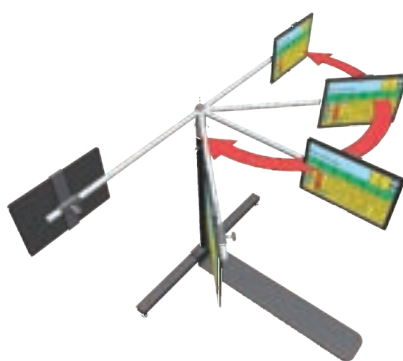

- iPadを固定する水平パイプが、垂直の支柱の軸を中心に左右90度ずつ回転します。

- 介助時は水平パイプを前後へ回転させて本体を壁側へ寄せることで簡単に機器を目の前から退かすことができます。

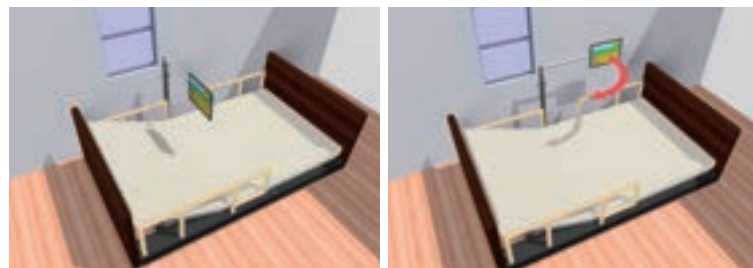

- ベッドの下に入る脚部は厚さ6mmの鉄板なので、超低床ベッドでも下部のフレームに干渉しません。ほぼすべてのベッドに設置することができます。

- ベッドの上部から設置して、介助時は水平パイプを左右に回して機器を邪魔にならない位置に避けることができます。
- 水平パイプの回転機能と本体の上下調整機能を組み合わせることで仰臥位、側臥位時も機器を目の前に固定することが可能です。



ワイヤレスコール


スイッチ端子付き小電力型ワイヤレスコール 接点入力送信機器

AYL-WT001



利用例：ワイヤレスコール卓上型受信器
※入力スイッチ、ワイヤレスコール卓上型受信器は別売りです

- 入力スイッチに直接接続して離れた場所にいる人を呼ぶためのブザーの送信器です。下記受信器とセットで利用します。

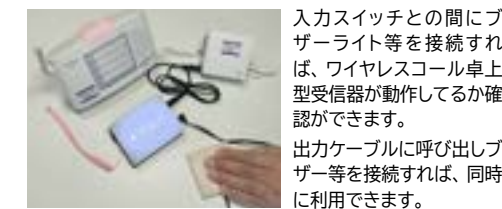


ご注意：ナースコールではありません。生命に関わる用途での使用はできません。

希望小売価格：28,000円(税抜)
30,800円(税込)

小電力型ワイヤレスコール卓上型受信器

AYL-FCP012

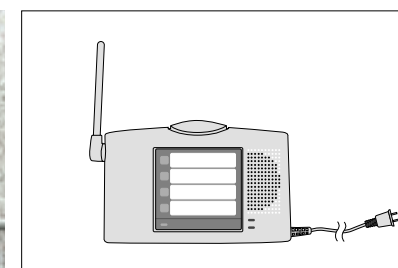


- 電波は見通しで40mまで届きます。
- 音と光で呼び出しをお知らせします。暗いところでも、確認することができます。
- 家庭用コンセントに接続するので電池切れの心配はありません。

希望小売価格：27,900円(税抜)
30,690円(税込)

小電力型ワイヤレスコール携帯型受信器セット

AYL-FCP013

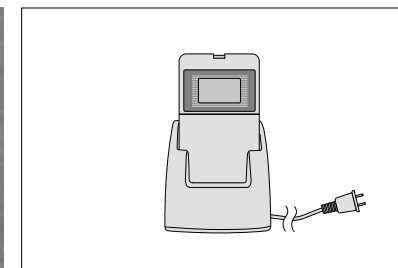

- 電波は見通しで30mまで届きます。
- 音と振動の両方で呼び出しをお知らせします。
- 小型軽量でポケット等に入れて持ち歩くことができます。

希望小売価格：42,400円(税抜)
46,640円(税込)


ワイヤレスコールの接続について



入力スイッチ

ご注意:各スイッチの動作圧は参考です。実際には押す面の面積や押す距離が関係するので、動作圧が小さいほど押しやすいとは言えません。※他メーカーのスイッチも、ほとんどのものが対応しています。

シンプルスイッチ-W AYL-FCP021

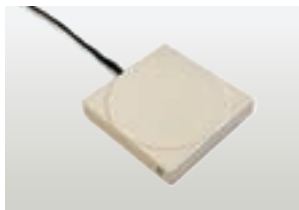

シンプルスイッチ-W/シンプルスイッチ-N	
大きさ	66mm×66mm×14mm (ケーブルを除く)
動作圧	約180g/約620g

- 主に手で操作するためのシンプルなスイッチです。操作したときにクリック感があります。
- 手のひらや指で押すだけでなく、つまむ、握る、足を使うなど幅広い使い方ができます。
- 押す時のバネの力の強さが2種類あります。
シンプルスイッチ-W スプリング弱(白) AYL-FCP021
シンプルスイッチ-N スプリング並(黒) AYL-FCP022


フットスイッチ AYL-FCP023



フットスイッチ	
大きさ	100mm×62mm×25mm (ケーブルを除く)
動作圧	約230g

- 一番シンプルな入力スイッチです。押したときにクリック感があるので、操作感覚を足で感じるすることができます。
- 上面の前側に傾斜があり、足で踏みやすくなっています。

ホッパタッチスイッチT AYL-FCP024

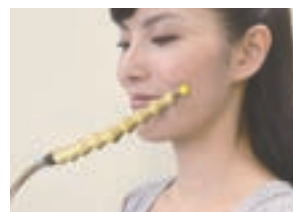

ホッパタッチスイッチT	
大きさ	Φ30mm×長さ100mm (クリップ、ケーブルを除く)
動作圧	約10g

- 金属とプラスチックを組み合わせたアームなので、設置しやすくなっています。
- 先端の丸い部分を前後・左右・上のいずれの方向からでも軽く触れることでスイッチが入ります。
- ほほ、唇、眉などわずかに動く部位で操作可能です。
- 電源不要で移動時や外出時でも使えます。
- 固定用のクリップが付属されているので、取り付けが簡単です。

フィンガースイッチ AYL-FCP025



フィンガースイッチ	
大きさ	27mm×22mm×10mm
付属品	面ファスナーシール(スイッチ背面用、丸型)、木管、面ファスナーストラップ、面ファスナーバンド、取扱説明書、操作事例集
動作圧	約160g

- 主な対象者 パーキンソン病、多系統萎縮症、脊髄小脳変性症、脳性麻痺など「力はあるが、震えも大きい方」
- 特徴 表面が盛り上がったピアノスイッチを採用した硬めのスイッチです。震えではONになりにくく、強く押す力が加わったらONにできるスイッチです。

ロングスイッチ AYL-FCP026



ロングスイッチ	
大きさ	60mm×26mm×8mm
付属品	面ファスナーシール(スイッチ背面用、長方形)、木管、面ファスナーストラップ、面ファスナーバンド、取扱説明書、操作事例集
動作圧	約25g

- 主な対象者 ALS、脳幹出血患者など「力が弱く震えも少ない方」
- 特徴 薄くて軽く、様々な利用、設置方法の工夫がしやすいスイッチです。「力が弱く震えが少ない方」にとって使いやすいスイッチです。人差し指から小指までの4本の指で握って操作するのに適しています。

ハーフスイッチ AYL-FCP027



ハーフスイッチ	
大きさ	7mm×26mm×7mm
付属品	面ファスナーシール(スイッチ背面用、丸形)、木管、面ファスナーストラップ、面ファスナーバンド、取扱説明書、操作事例集
動作圧	約10g

- 主な対象者 ALS、脳幹出血患者など「力が弱く震えも少ない方」
- 特徴 小さく薄く軽いスイッチで、かなり力の弱い方でも押すことができます。「力が弱く震えが少ない方」にとって使いやすいスイッチです。親指で押す、または親指と人差し指の間に挟んで押すのに適しています。

入力スイッチ練習ツール

入力スイッチに接続してスイッチを押す／離すの練習を支援するツールです

ブザーライトS 入力スイッチ練習/確認用

身体障害者のスイッチ操作の課題を解決!

多くの身体障害者が「意思伝達装置がうまく使えません」とか「機器を練習するために、デモ機を長い期間貸してください!」と言われます。しかし、実際にそれらの機器をうまく使えない時の原因は機器ではなく、入力スイッチの操作がうまくできないことにあります。そこで、利用者が使おうと考えている入力スイッチにこの「ブザーライト」を接続すれば、入力スイッチを押した時だけ音と光で教えてくれるので、利用者が上手に入力スイッチを押せるようになる練習ができます。そして、入力スイッチの操作が上手になってから意思伝達装置を借りて操作すれば、すぐに意思伝達装置が使えるようになります。結果的には、まず最初にこの「ブザーライト」で入力スイッチだけで練習した方が意思伝達装置などの導入が早まったという方もたくさんおられます。

写真の入力スイッチは別売です。




●製品紹介はこちら
<https://accessyell.co.jp/products/wt012/>



ブザーライトを使った入力スイッチの練習方法


第1段階 押す、離すができる

体の部位・姿勢、ポジションを調整し、確実に押すことができるようにする。うまくいかない場合はスイッチの見直しも考える。

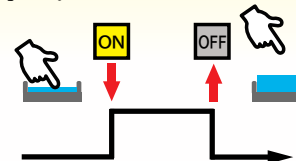


第2段階 タイミングを合わせて押すことができる

掛け声の回数や速さを調整して、タイミングよく押せるように練習する。また、押さずに待つこともできるようにすることが望ましい。

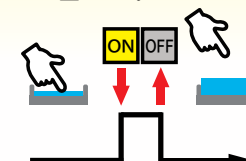

第3段階 選択肢を考えながら押すことができる

選択する場所を考えながら、押したいタイミングで「押す、離す」を繰り返すできるようにする。

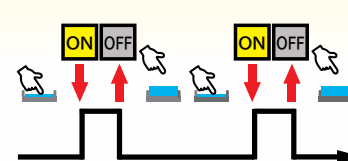

HPでは練習方法を動画で詳しく紹介しています。

使用方法



入力スイッチ(別売)を接続します。



入力スイッチを押すとLEDが光ってブザーが鳴ります。



出力ケーブルに呼び出しブザー等を接続すれば、同時に利用できます。

ブザーライトS

AYL-WT012

希望小売価格：10,000円(税抜)
11,000円(税込)

ご注意:ブザーライトSはナースコールではありません。
生命に関わる用途での使用はできません。



外形寸法	タテ94mm、ヨコ74mm、高さ40mm
入力コネクタ	φ3.5mmミニジャック(モノラル)
電源	単3乾電池3本(別売)
重量	165g(単3乾電池3本含む)
連続駆動時間	約18時間 (ブザーON、LEDライトとリレーは常時ON) パナソニック製アルカリ乾電池 エボルタ使用時